




Kvikguide til højtlesning på Clover Book XL Mate og Pro

Mindre læseopgaver


Skrue forstørrelsen ned til det mindst mulige, og tryk på højtlesnings-knappen (se illustration til højre). Læg læsestoffet ind under apparatet, så al den tekst, der ønskes læst højt, er indenfor skærbilledet. Tryk derefter på højtlesnings-knappen igen for at starte højtlesningen.

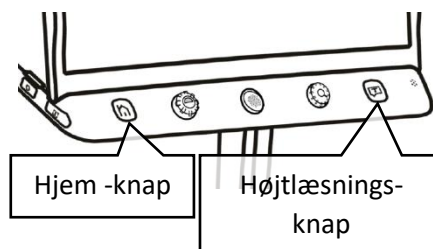

Tilvælge A4-tilstand

Valg af A4-tilstand gør det muligt at skrue lidt længere ned for forstørrelsen, og dermed gøre det nemmere at få et helt A4-ark med tekst vist i sin helhed på skærmen.


Tryk hjem-knappen ind, og **hold** den trykket ind i ca. 3 sekunder; dette kalder hjem-skærmen frem, som illustreret til højre. Tryk på firkanten med teksten "A4" med fingeren direkte på skærmen. Herefter startes højtlesning som beskrevet ovenfor.

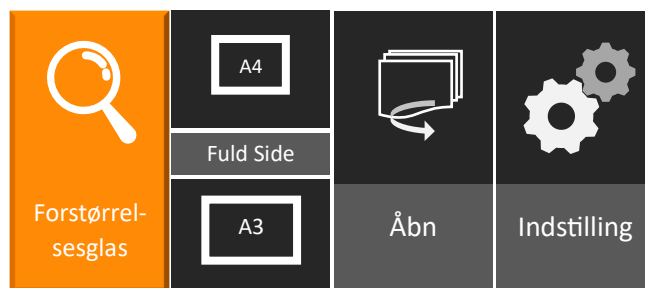

For at slå A4-tilstanden fra, kaldes hjem-skærmen frem igen, hvorefter man vælger feltet "Forstørrelsesglas" ved at trykke på det med fingeren direkte på skærmen.

Højtlesning på A3-format

Fra hjem-siden kan man også vælge feltet "A3"; dette giver adgang til forskellige værktøjer til læsning af dokumenter i A3-format, som illustreret til højre. Højtlesning startes ved at trykke med en finger direkte på taleboble-symbolet nederst til højre på skærbilledet.

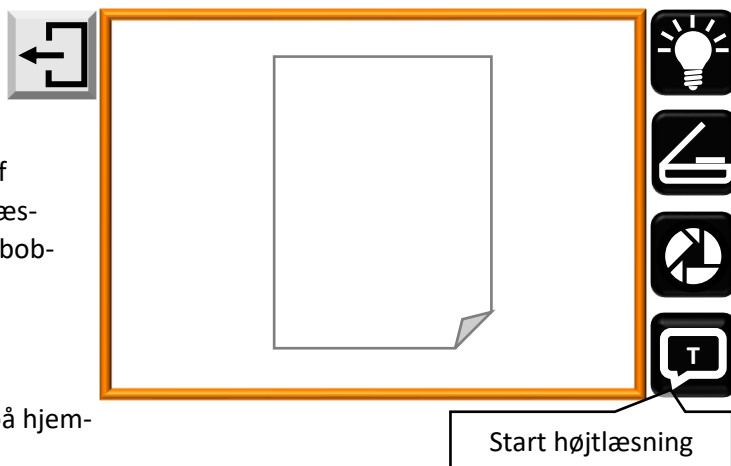

Afslutte højtlesning

Man "forlader" højtlesningsfunktionen ved at trykke på hjem-knappen, og **holde** den nede i ca. 3 sekunder.

Værktøjer under højtlesning

Under højtlesning kan man kalde det "betjeningspanel", der er vist til højre, frem, ved at trykke kortvarigt på hjem-knappen. Disse værktøjer vælges ved at trykke med en finger direkte på et af symbolerne på panelet.

Tilpas højtlesnings-tempo:

Sæt fingeren på det runde symbol på skalaen, og "træk" det mod højre eller venstre for henholdsvis at øge eller sænke det tempo, teksten læses højt med.

Start og stop højtlesning: Tryk på det runde symbol med afspilnings-trekanten for at holde en pause i højtlesningen, og tryk igen for at genoptage højtlesningen.

Læs med-funktion: Normalt viser skærmen en "naturtro" gengivelse af den læste tekst. Ved at vælge læs med-funktionen, vises i stedet den "rene" tekst (dvs. uden illustrationer og andre detaljer i det læste dokument), og den del af teksten der aktuelt læses højt, bliver løbende fremhævet. Tryk samme sted for at vende tilbage til den "naturtro" visning.

Til- og fravælg tekstinddeling: Når dette symbol på skærmen viser tallene 1 og 2 samt nogle inddelingsstreger, vil Clover Book XL efter bedste evne inddеле teksten i sektioner, f.eks. artikler på en avisside. Man kan fravælge denne inddeling ved at trykke på symbolet (som derved ændres til at vise et kvadrat); dette får Clover Book XL til at læse al den viste tekst fra ende til anden.

Inddeling af teksten kan tilvælges igen ved at trykke en gang mere på samme symbol.

Når tekstinddeling er valgt til, vil de forskellige dele af teksten være markeret med rektangulære rammer. Tryk med fingeren indenfor en af disse rammer på skærmen, for at vælge hvilken sektion, der skal læses højt.

Valg af ét eller flere tekstafsnit: Ved at trykke på dette symbol får man mulighed for at vælge flere af de tekstafsnit, der er markeret med rammer på skærmen, ad gangen – for eksempel både overskriften, manchetten og brødteksten i en avisartikel. Når denne funktion er slået til, skifter rammerne på skærmen mellem orange (tilvalgt) og grå (fravalgt), når man trykker på dem med en finger, og herefter læser Clover Book XL alle de afsnit der er markeret med orange fra ende til anden.

